



Eleganza **Classic**



Прикроватная тумбочка

Classic – функциональность и удобство для пациентов

Универсальные тумбочки серии Eleganza Classic (с надкроватным столиком – опция) могут размещаться с любой стороны от кровати за счет использования двусторонней системы выдвижных ящиков.

- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАДКРОВАТНОГО СТОЛИКА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОМФОРТА ПАЦИЕНТА
- ЛЕГКОЕ И УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОДАРЯ НОВОЙ СИСТЕМЕ ДВОЙНЫХ РОЛИКОВ
- УДОБСТВО И ПРОСТОТА ДЕЗИНФЕКЦИИ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Возможность размещения с любой стороны от кровати.
- Новый встроенный в корпус механизм управления надкроватным столиком.
- Возможность дополнительных опций: встроенный держатель бутылок и журналов, держатель полотенец, держатель телефона, замок нижней секции.
- Современная система двойных пластиковых роликов с индивидуальной блокировкой 2-х колес.



Удобный съемный пластиковый контейнер.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность регулировки надкроватного столика (высота, угол наклона).
- Корпус тумбочки выполнен из оцинкованной, электростатической, лакированной стали, обеспечивающей дополнительную защиту от коррозии. Верхняя столешница, дверки и фронтальные поверхности выдвижных ящиков изготовлены из HPL-пластика стойкого к механическим, химическим и температурным воздействиям.

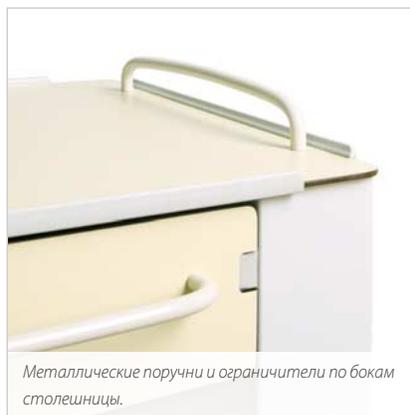

Металлические поручни и ограничители по бокам столешницы.



Возможность использования держателя бутылок и журналов (стандарт).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наружные габариты (без надкроватного столика)	50×51,5 см
Размеры надкроватного столика	59×33,7 см
Высота	88,5 см
Высота подъема надкроватного столика (с колесами диам. 75 мм)	73 – 108 см
Максимальная нагрузка надкроватного столика (в центре)	9 кг
Диаметр колес	7,5 см
Вес	35 кг