

Умная автоматизация преаналитического этапа
лабораторных исследований

Автоматическое штрихкодирование пробирок

Приборы серии HENe и HENe DUO



КОМПАНИЯ ENERGIUM ВЫПУСТИЛА НОВЫЕ ПРИБОРЫ СЕРИИ HEN

для маркировки и выдачи пробирок
в процедурных кабинетах
с потоком от 300 пациентов в день

HENe
для работы
одной медсестры

HENe DUO
для одновременной работы
двух медсестер


- Вместимость до 840 пробирок!
- Производительность 1200 пробирок в час!
- Простая и удобная загрузка пробирок
- Совместимость с вакуумными пробирками всех фирм-производителей, в том числе Sarstedt




Ячейки
Два типа ячеек вместимостью 50 и 120 пробирок позволяют подобрать оптимальную комплектацию, исходя из потока пациентов. Одновременно можно работать с двумя типами ячеек.




Загрузка пробирок
Пробирки загружаются в ячейки россыпью в произвольном направлении, что значительно ускоряет и облегчает работу медицинского персонала. Дополнительно доставать ячейки из прибора не требуется.

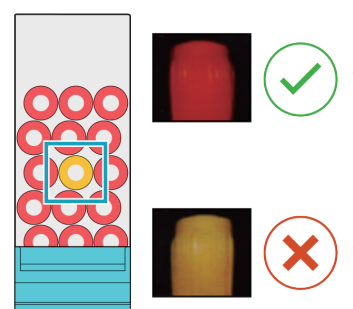

Система контроля
Система распознавания пробирок по цвету крышки исключает возможность выдачи неверной пробирки. Звуковой сигнал оповещает медсестру, если в ячейку были загружены пробирки неверного цвета.

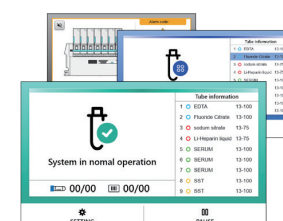

Сенсорный экран
Большой сенсорный цветной экран с диагональю 7" отображает текущее состояние прибора, сигналы об ошибках.

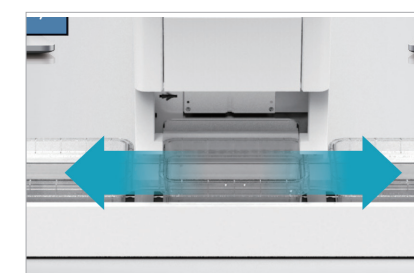


Блок DUO
Устанавливается на HENe. Позволяет организовать одновременную работу двух медсестер. Оснащен мини конвейером, по которому контейнер с промаркированными пробирками доставляется каждой медсестре.




Маркировка и выдача пробирок
Прибор выбирает пробирки в соответствии с назначением, маркирует их, а также печатает дополнительные этикетки (при необходимости). Промаркированные пробирки выдаются в многоразовый контейнер.

Технические характеристики:

HENe

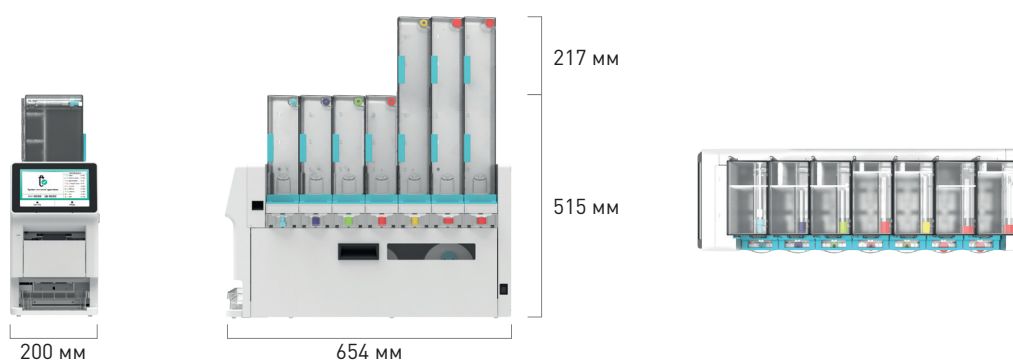

HENe DUO

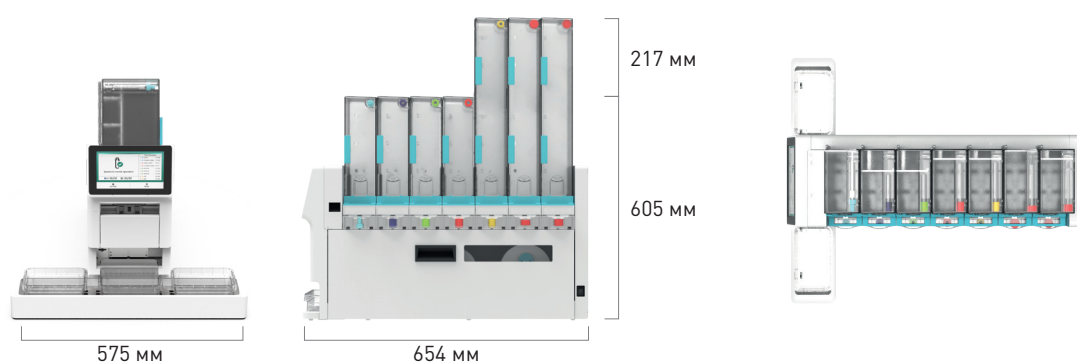

Модель	HENe / HENe DUO	
Время маркировки одной пробирки	3,0 сек	
Вместимость одной ячейки	Базовый тип ячейки	70 штук (диаметр 13 мм), 50 штук (диаметр 16 мм)
	Расширенный тип ячейки	120 штук (диаметр 13 мм), 100 штук (диаметр 16 мм)
Совместимость с пробирками	диаметр: 11-16 мм, высота: 75-128 мм	
Количество используемых типов пробирок	до 7	
Метод печати этикеток	термопечать	
Этикетки	ширина: 28-35 мм, длина: 50 мм, кол-во в рулоне: 1500-2500 штук	
Сканер штрихкода	1D, 2D	
Питание	DC, 24В, 5Ач	
Габариты (Ш x В x Г)	HENe	200x515x654 мм (высота 732 мм с расширенным боксом)
	HENe DUO	575x605x654 мм (высота 822 мм с расширенным боксом)
Вес	HENe: 22 кг/ HENe DUO: 29,6 кг	
Интерфейс	USB, TCP/IP, Serial	
Соответствие стандартам	CE, KC, RoHS	



ООО «БиоСистемы»

Россия, 197022, Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, д. 23, лит. Е
тел.: +7 (812) 320 49 49
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Москва, тел.: +7 (800) 555 49 40
Новосибирск, тел.: +7 (383) 227 09 63
Ростов-на-Дону, тел.: +7 (928) 192 90 40
Н. Новгород, тел.: +7 (831) 278 61 47
Екатеринбург, тел.: +7 (343) 357 30 26
Уфа, тел.: +7 (937) 855 78 52
Казань, тел.: +7 (937) 593 39 44
Самара, тел.: +7 (927) 688 28 49
Хабаровск, тел.: +7 (924) 203 10 58

Единый бесплатный
номер сервисной
службы для всех
регионов России:

8 800 444 33 49